

Essential Thera-P Behandlungstabelle

Benutzerhandbuch

MD

EPT9020

Gilt für folgende Modelle:

EPT9024

EPT9028

REF

EPT9021

EPT9025

EPT9029



Wichtig! Dieses Benutzerhandbuch enthält wichtige Informationen für den Benutzer des Produkts. Alle, die dieses Produkt verwenden, sollten seinen Inhalt lesen und vollständig verstehen. Denken Sie daran, dieses Handbuch an einem Ort aufzubewahren, an dem es den Benutzern des Produkts jederzeit zur Verfügung steht.

Inhaltsverzeichnis:

Einführung:.....	2
Sicherheitsvorkehrungen & Definitionen:	3
Installation & Auspacken:	5
Technische Spezifikationen:.....	6
Betrieb:.....	7
Vorbeugende Wartung:	11
Polsterreinigung & Pflege:	11
Service:.....	12
Ersatzteile:.....	14
Garantie:	15
Kontaktinformationen des Herstellers:	15

Einführung:

Benutzerfreundlichkeit, mehrere Optionen und ein schlankes, aber langlebiges Design machen die Essential THERA-P-Reihe von elektrischen Behandlungsliegen zur ersten Wahl für Therapeuten auf der ganzen Welt. Sieben Top-Optionen ermöglichen es Therapeuten, den Tisch auszuwählen, der ihren Bedürfnissen am besten entspricht und der die bequemste Positionierung der Patienten gewährleistet. Die Essential THERA-P elektrische Behandlungsliege ist aus präzisionsgeschnittenem Flach- und Rohrstaht für Langlebigkeit und Stil konstruiert. Es hat auch ein flüsterleises Hubsystem mit anhebendem Fußpedal. Die Essential THERA-P elektrische Behandlungsliege wurde mit Blick auf Einfachheit entworfen und bietet eine standardmäßige weiße Pulverbeschichtungsbasis.

Verwendungszweck: Die elektrische Behandlungsliege Essential Thera-P ist für die Verwendung in einer klinischen Umgebung vorgesehen, um Patienten während der Behandlung zu unterstützen.

Sicherheitsvorkehrungen & Definitionen:

Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich
an Pivotal Health Solutions-Dienst
unter 1-800-743-7738.



WARNUNG: Lassen Sie den Patienten niemals unbeaufsichtigt auf dem Tisch liegen.



Quetschgefahr: Angetriebene Komponenten, die zum Anheben und Absenken dieses Tisches verwendet werden, stellen eine potenzielle Quetschgefahr dar. HALTEN SIE KINDER VOM BEHANDLUNGSBEREICH FERN. Lassen Sie nur den Patienten und autorisiertes Personal im Behandlungsbereich.



ELEKTRISCHE VERBINDUNG: Zu Ihrer persönlichen Sicherheit muss dieser Tisch geerdet werden. Dieser Tisch ist mit einem Netzkabel mit einem dreipoligen (3) geerdeten Stecker ausgestattet. Um die Gefahr eines möglichen Stromschlags zu minimieren, muss es an eine passende dreipolige (3) geerdete Wandsteckdose angeschlossen werden, die gemäß dem National Electrical Code und den örtlichen Vorschriften und Verordnungen geerdet ist. Wenn keine passende Wandsteckdose verfügbar ist, liegt es in der Verantwortung und Pflicht des Kunden, eine ordnungsgemäß geerdete Wandsteckdose mit drei (3) Stiften von einem qualifizierten Elektriker installieren zu lassen. Die Leistungsanforderungen der Tabelle finden Sie im Abschnitt Technische Daten.

Beachten Sie vor der Verwendung dieses Geräts die folgenden Sicherheitsvorkehrungen:

- Bevor Sie dieses Gerät verwenden, vergewissern Sie sich, dass Sie dieses gesamte Handbuch gelesen und verstanden haben.
- Eine staatlich zugelassene Ärztin oder ein staatlich zugelassener Arzt beziehungsweise eine entsprechend autorisierte klinische Fachkraft muss sicherstellen, dass der Gesundheitszustand und die physische Verfassung des Patienten für die chiropraktische Behandlung auf dem Behandlungstisch geeignet sind. Die Behandlung muss unter der Anleitung einer zugelassenen klinischen Fachkraft durchgeführt werden.
- Überschreiten Sie niemals das maximal unterstützte Gewicht des Tisches.
- SITZEN, LEHNEN ODER ANDERWEITIG NICHT ÜBERGEWICHTE NEIGENDE KOPFSTÜCKE ODER ARMABSCHNITTE. Diese Kippabschnitte sollen nicht mehr als das Gewicht des Körperteils halten, das das Teil halten soll.
- Schließen Sie den Tisch nur an eine geerdete Steckdose an, die an einen Stromkreis mit einem abgesicherten Leistungsschalter angeschlossen ist in Übereinstimmung mit dem National Electrical Code und den örtlichen Vorschriften und Verordnungen.
- Nur auf trockenen Oberflächen verwenden. Stellen Sie sicher, dass die Füße des Tisches nicht rutschen.
- Stellen Sie sicher, dass die Laufrollen verriegelt sind.
- Dieser Tisch ist NICHT für den Patiententransport vorgesehen.
- NICHT zur Verwendung mit anderem Zubehör als dem in diesem Handbuch angegebenen bestimmt.
- Betreiben Sie den Tisch nicht in einer Umgebung, in der andere Geräte vorhanden sind, die absichtlich elektromagnetische Energie ungeschirmt abstrahlen.
- Erklären Sie dem Patienten immer, wie er richtig auf den Tisch auf- und absteigt. Helfen Sie dem Patienten, Stürze zu vermeiden.
- Halten Sie die Hände des Patienten immer auf der Oberseite der Kissen.

- Halten Sie Hände und Füße von beweglichen Teilen und Quetschstellen fern.
- Stellen Sie sicher, dass die Bedienelemente ordnungsgemäß verriegelt sind, bevor Sie den Patienten positionieren oder freigeben.
- Lassen Sie den Patienten niemals unbeaufsichtigt auf dem Tisch liegen.
- Befolgen Sie die Anweisungen zur vorbeugenden Wartung in diesem Handbuch.
- Stellen Sie sicher, dass alle Komponenten auf Beschädigungen untersucht wurden und voll funktionsfähig sind.
- Überprüfen Sie Kabel und Anschlüsse vor jedem Gebrauch.

Warnung und Vorsichtsmaßnahmen in diesem Handbuch sind durch spezielle Symbole gekennzeichnet. Anwendbare Symbole werden unten zusammen mit einer Beschreibung des Symbols gezeigt. Lesen Sie diese Symbole und alle Sicherheitsvorkehrungen, bevor Sie den Tisch in Betrieb nehmen.

	VORSICHT: Text mit einem „VORSICHT“-Indikator erklärt mögliche Sicherheitsverstöße, die zu Verletzungen führen können.
	WARNUNG: Text mit der Anzeige „WARNUNG“ erklärt mögliche Sicherheitsverstöße, die möglicherweise zu schweren Verletzungen und Sachschäden führen.
	Quetschpunkt: Weist auf einen Freiraum zwischen manuell einstellbaren beweglichen und feststehenden Teilen hin, in dem Körperteile eingeklemmt werden können, was zu leichten Verletzungen führen kann.
	Warnung: Hochspannung
	Quetschgefahr: Weist auf den Abstand zwischen angetriebenen beweglichen und stationären Teilen hin, der eine potenzielle Quetschgefahr darstellt.
	Gebrauchsanweisung: Weist darauf hin, dass der Benutzer die Gebrauchsanweisung konsultieren muss.
	EXPLOSIONSGEFAHR Text mit dem Indikator „EXPLOSIONSGEFAHR“ erklärt mögliche Sicherheitsverletzungen, wenn dieses Gerät in Gegenwart von entflammenden Anästhetika verwendet wird.
	Enthält elektronische Materialien. Recyceln und entsorgen Sie das Gerät ordnungsgemäß gemäß den örtlichen, staatlichen und bundesstaatlichen Gesetzen.
	Gibt den Gerätehersteller an.
	Zeigt an, dass es sich bei dem Produkt um ein medizinisches Gerät handelt.



WARNUNG: Unter keinen Umständen sollte der Tisch von seinem ursprünglichen Design abgeändert werden. Wenden Sie sich an Pivotal Health Solutions, wenn Sie Hilfe beim Service benötigen.



ACHTUNG: Mögliche Explosionsgefahr bei Verwendung in Gegenwart von brennbaren Anästhetika.

Installation & Auspacken:

ZUM ANHEBEN UND BEWEGEN DES TISCHS SIND MINDESTENS ZWEI PERSONEN ERFORDERLICH. HEBEN SIE DEN TISCH AM GRUNDRAHMEN AN!



WARNUNG: Installieren/verwenden Sie dieses Gerät nicht neben oder gestapelt mit anderen Geräten, da dies zu einem fehlerhaften Betrieb führen könnte. Wenn eine solche Verwendung erforderlich ist, sollten dieses Gerät und die anderen Geräte beobachtet werden, um sicherzustellen, dass sie normal funktionieren.

Nachdem Sie die obere und seitliche Abdeckung der Versandkiste entfernt haben, bemerken Sie möglicherweise Metallbänder und Kabelbinder aus Kunststoff. Diese dienen zur Sicherung verschiedener Tischteile und müssen entfernt werden. Sobald alle Bänder und Kabelbinder entfernt sind, muss der Tisch direkt nach oben gehoben werden, um alle Transportsicherungen zu beseitigen.

Sobald der Tisch aus der Transportkiste genommen wurde, stellen Sie den Tisch auf eine ebene Fläche und überprüfen Sie die Tischkissen, den Rahmen, die Kabel usw. auf Beschädigungen. Wenn keine Schäden festgestellt werden, stecken Sie den Tisch ein und testen Sie die Höhe, das Gefälle und alle anderen Optionen, die sich auf Ihrem Tisch befinden. Wenden Sie sich bei Fragen oder Bedenken an Pivotal Health Solutions oder Ihren Händler.

Wenn der optionale Akku gekauft wurde, sollte der Akku vor der Verwendung mindestens 24 Stunden lang ununterbrochen aufgeladen werden.

Anleitung für beschädigte Ware: Der Inhalt dieser Lieferung wurde von erfahrenem Personal geprüft und verpackt. Wenn Ihr Unternehmen den Versand arrangiert hat, sollten Schäden auf dem Frachtbrief vermerkt werden, bevor Sie die Sendung unterzeichnen, dann sollten während des Transports beschädigte Artikel sofort dem ausliefernden Spediteur gemeldet werden, und Sie müssen eine Reklamation einreichen. Wenn der Versand von Pivotal Health Solutions arrangiert wurde, vermerken Sie alle Schäden auf dem Frachtbrief, bevor Sie die Annahme des Produkts unterzeichnen, und benachrichtigen Sie Pivotal Health Solutions unverzüglich. Wenn Sie das Produkt nicht auf Transportschäden untersuchen, bevor Sie das Produkt unterschreiben, kann dies Ihre Garantie beeinträchtigen. Wir sind weder verantwortlich noch können wir die Rücksendung von Waren akzeptieren, die während des Transports durch Dritte veranlasst wurden.



WARNUNG: Tragbare HF-Kommunikationsgeräte (einschließlich Peripheriegeräte wie Antennenkabel und externe Antennen) sollten nicht näher als 30 cm (12 Zoll) an irgendeinem Teil der Essential Thera-P Electric-Behandlungsliege verwendet werden, einschließlich der Kabel, die mit der Essential Thera-P Electric-Behandlung verbunden sind. Andernfalls könnte die Leistung dieses Geräts beeinträchtigt werden.

Technische Spezifikationen:

Basismodellnummer	EPT9020	EPT9021	EPT9024	EPT9025	EPT9028	EPT9029	
Modellname	Wesentliches Thera-P Behandlungstabelle	Essential Thera-P Behandlungstabelle	Essential Thera-P Bariatrisch	Essential Thera-P Bariatrisch	Essential Thera-P Sieben Abschnitt	Essential Thera-P Sieben Abschnitt	
Kissenkonfigurationen verfügbar	EPT01	EPT01					
	EPT02	EPT02					
	EPT03	EPT03					
	EPT04	EPT04					
	EPT05	EPT05					
	EPT06	EPT06					
	EPT3011	EPT3011	EPT11	EPT11	EPT77	EPT77	
	EPT3611	EPT3611	EPT12	EPT12			
	EPT3012	EPT3012	EPT13	EPT13			
	EPT3612	EPT3612	EPT15	EPT15			
	EPT3013	EPT3013					
	EPT3613	EPT3613					
	EPT3015	EPT3015					
	EPT3615	EPT3615					
Nennspannung	120V	240V	120V	240V	120V	240V	
Optionen für die Fußsteuerung	S1075 S1077 S1078 S2078	Einzelfußbedienung für Tischerrhöhung (Standard) Duale Fußsteuerung für die Tischerrhöhung Doppelte Fußstangensteuerung für die Tischerrhöhung Doppelte und vordere Fußstangensteuerung für die Tischerrhöhung					
Andere Optionen	S1135 EPTPH01 EPT10001	Manuell anhebbarer Mittelteil (nur EPT03 & EPT05) Papierrollenhalter und -schneider Nasenlochstopfen					
Maße	27" B x 77" L		40" B x 77" L		27" B x 77" L		
Höhe	17 - 35" H						
Winkel des Kopfabschnitts	+40° bis -90°				+35° bis -45°		
Winkel der unteren Extremität	0° bis 65°				0° bis 75°		
Horizontalbereich der Armlehne	0° bis 45°						
Armlehnen-Vertikalbereich	0 bis 7"						
Schaum	2-Zoll-Schaumkissen mit hoher Dichte und abgerundeten Ecken						
Nennfrequenz	50/60 Hertz						
Nennstrom	10 A						
Sicherungstyp	Keine vom Benutzer zu wartende Sicherung						
Tragfähigkeit	650 Pfund		650 Pfund		650 Pfund		
Auslastungsgrad	2 Minuten an, 18 Minuten aus						
Elektrische Klassifizierung	Klasse 1						
Elektrischer Typ	 Type B						
IP-Bewertung	das Fußpedal IPX1; andere Komponente - siehe Komponente						
Netzkabel (120 V)	96 Zoll (243 cm) Kabellänge, 10 A, ungeschirmt						
Netzkabel (240 V)	96 Zoll (243 cm) Kabellänge, 10 A, ungeschirmt						



WARNUNG: Halten Sie den Tisch von Bereichen mit hoher Feuchtigkeit fern. Nur für den Innengebrauch.

Betriebsbedingungen: Dieser Tisch sollte zwischen 40 °F (4,4 °C) und 100 °F (37,8 °C) und einer relativen Luftfeuchtigkeit zwischen 30 % und 80 % betrieben werden.

Transport- und Lagerbedingungen: Dieser Tisch sollte bei Temperaturen zwischen -40 °C (-40 °F) und 70 °C (158 °F) und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 10 % bis 100 % transportiert und gelagert werden.

Erwartete Lebensdauer: Dieses Produkt hat eine voraussichtliche Lebensdauer von ungefähr 10 Jahren, wenn es gemäß dieser Anleitung korrekt gehandhabt, gewartet und überprüft wird.

Design und Qualität: Pivotal Health Solutions ist nach ISO 13485, dem Standard für die Medizinprodukteindustrie, zertifiziert.

Produktänderungen: Pivotal Health Solutions, Inc. behält sich das Recht vor, Produktänderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen. Wenden Sie sich an Ihren Pivotal Health Solutions-Vertreter, um Rat und Informationen zu Produkt-Upgrades zu erhalten.

Betrieb:



WARNUNG: Die Verwendung von Zubehör und Kabeln, die nicht von Pivotal Health Solutions angegeben oder bereitgestellt wurden, kann zu erhöhten elektromagnetischen Emissionen oder einer verringerten elektromagnetischen Immunität und zu einem unsachgemäßen Betrieb führen.



WARNUNG: Nicht für den Krankentransport.



Quetschgefahr: Angetriebene Komponenten, die zum Anheben und Absenken dieses Tisches verwendet werden, stellen eine potenzielle Quetschgefahr dar. HALTEN SIE KINDER VOM BEHANDLUNGSBEREICH FERN. Lassen Sie nur den Patienten und autorisiertes Personal im

Behandlungsbereich.



KNICKPUNKT: Halten Sie die Hände des Patienten beim Absenken, Anheben und Neigen des Tisches immer auf der Oberseite der Kissen, um mögliche Quetschstellen zu vermeiden.

Hinweis für Benutzer: Wenn ein schwerwiegender Vorfall auftritt, melden Sie den Vorfall Pivotal Health Solutions. (Kontaktinformationen finden Sie im Abschnitt mit den Kontaktinformationen des Herstellers). Wenn sich der Vorfall in der EU ereignet, melden Sie jeden schwerwiegenden Vorfall auch der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem der Anwender und/oder Patient niedergelassen ist.

Dem Patienten auf den Tisch helfen:

- 1) Vergewissern Sie sich vor dem Start, dass der Tisch in der niedrigsten Position und flach steht.
- 2) Der Arzt oder geschultes Personal sollte dem Patienten immer auf dem Tisch helfen. Lassen Sie den Patienten nicht alleine auf den Tisch steigen.
 - a. Der Patient sollte sich auf das mittlere Kissen setzen und dann die Füße auf den Tisch schwingen.
 - b. Der Patient sollte weder auf den Ecken des Tisches noch auf dem Kopf- oder Fußende sitzen.
- 3) Der Patient sollte die Kleidung auf Schlüssel, Geldbörse, Gürtel oder andere Gegenstände überprüfen, die während der Behandlung Unbehagen verursachen oder die Polsterung beschädigen können.
- 4) Lassen Sie den Patienten niemals unbeaufsichtigt auf dem Tisch liegen.

**NICHT SITZEN, LEHNEN ODER ANDERWEITIG
ÜBERGEWICHTER NEIGBARER KOPFSTÜCK
ODER ARMABSCHNITTE.**

Tischbetrieb:


- 1) Um mit der Behandlung zu beginnen, vergewissern Sie sich vor dem Start, dass der Tisch in der niedrigsten Position und flach steht
- 2) Positionieren Sie den Patienten auf dem Tisch wie oben angeführt.
- 3) Wenn sich der Tisch in abgesenkter Position befindet, heben Sie ihn für die Behandlung auf die gewünschte Höhe an, sobald sich der Patient in Position befindet.
 - a. Wenn der optionale Akku verwendet wird, drücken Sie die EIN-Taste für > 1 Sekunde, bevor Sie den Tisch hochfahren.
 - b. Wenn die Akku-LED orange blinkt, sollte der Akku aufgeladen werden.
- 4) Führen Sie die gewünschte Behandlung durch. Beziehen Sie sich auf den Abschnitt „Betrieb“ und/oder die einzelnen Komponentenfunktionen weiter unten für die Bedienung bestimmter Tischfunktionen.
- 5) Bringen Sie den Tisch nach der Behandlung wieder in eine ebene und gerade Konfiguration.
- 6) Senken Sie den Tisch in die unterste Position ab, indem Sie das Fußpedal betätigen, oder, wenn der Tisch mit einem Fußbügel ausgestattet ist, halten Sie den Fußbügel hoch, um den Tisch abzusenken.
 - a. Wenn der optionale Akku verwendet wird, drücken Sie die AUS-Taste für > 3 Sekunden, um den Akku nach Abschluss der Behandlung auszuschalten.

Unterstützung des Patienten vom Tisch:

- 1) Weisen Sie den Patienten darauf hin, nicht alleine vom Tisch aufzustehen, um Belastungen zu vermeiden, die die Behandlung ungültig machen könnten, und um sicherzustellen, dass dem Patienten beim Hinlegen nicht schwindelig wird, was zu einem Ungleichgewicht führen kann.
- 2) Lassen Sie den Patienten sein volles Gleichgewicht finden, bevor Sie in eine stehende Position kommen. Best Practice ist es, den Patienten immer in der Nähe zu halten.

Tabellenoptionen und -funktionen:

Batterieinstallation:

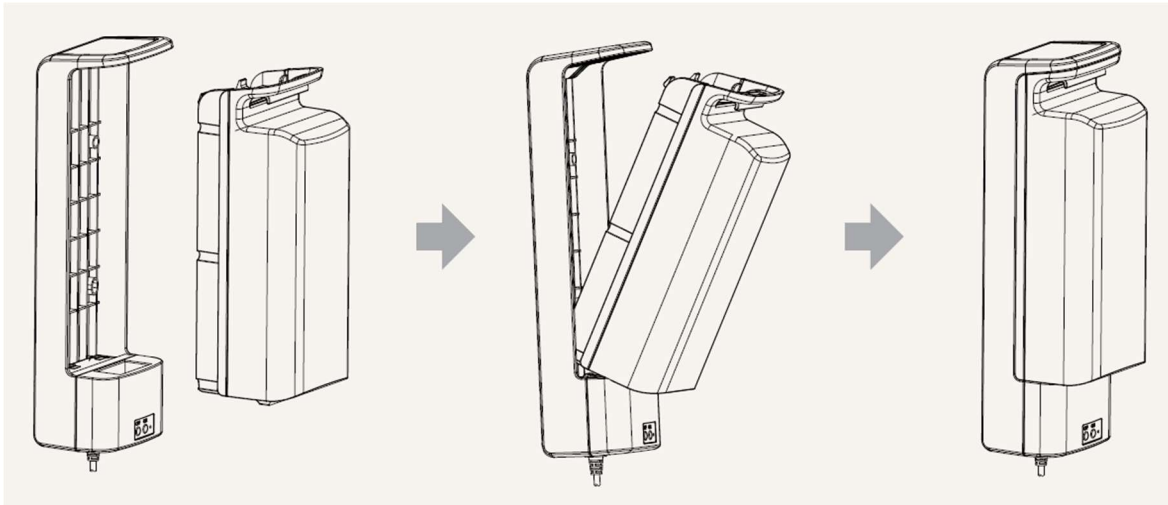

Interpretieren der Batterie-LED zur Statusbestimmung, wenn auf dem Tisch:

Status	Capacity	LED	
Hi charging	>80%	Green	Continuous on
Charging	<80%	Green	Short dimming (1 sec / 1 sec)
Hi battery	>25%	Green	Long dimming (0.5 sec / 4 sec)
Low battery	<25%	Orange	Long dimming (0.5 sec / 4 sec)
Protection	<20%	-	Off
Failure	-	Orange	Continuous on

Akku-LED zur Statusbestimmung beim Laden interpretieren:

Hinweis: Von einem schwachen Akku bis zu einem vollständig aufgeladenen Akku dauert es ungefähr 10 Stunden.

When charge by TP7C, TBB7 LED become off, and the status only shown on TP7C-

Status	Capacity	LED	
Hi charging	>80%	Green	continuous on
Charging	<80%	Orange	continuous on

Elevation:

- Verwenden Sie das Fußpedal zur Tischhöheneinstellung oder die optionale Fußstange, um die Tischhöhe anzuheben und abzusenken.

Fußstange: (Optional)

- Treten Sie auf die Fußstange, um den Tisch anzuheben. An gewünschter Stelle loslassen. Heben Sie die Fußstange mit der Schuhspitze an, um den Tisch abzusenken.

Anhebender Mittelteil: (Optional)

- Schieben Sie den Entriegelungshebel nach vorne, um die Verriegelung am mittleren Kissen zu lösen. Heben Sie gleichzeitig das mittlere Kissen an, um es in den gewünschten Winkel zu bringen. Die Kissenposition wird automatisch gesperrt. Zum Absenken das Kissen abstützen und den Verriegelungshebel drehen, um das Kissen zu entriegeln. Senken Sie das Kissen auf den gewünschten Winkel ab und lösen Sie den Drehsperrehebel. Um den Mittelteil wieder zu verriegeln, drehen Sie den Verriegelungshebel, um das Kissen zu entriegeln, und drücken Sie dann fest auf das Kissen, um es zu verriegeln.

Neigung des Kopfstücks: (Optional)

- Heben Sie das Kopfstück an, um es nach oben zu neigen. Wenn der Tisch mit einer elektrischen Neigung des Kopfkissens ausgestattet ist, drücken Sie die AUFWÄRTS-Taste auf der Handsteuerung. Die Kissenposition wird automatisch gesperrt. Zum Absenken das Kissen abstützen und den Verriegelungshebel drehen, um das Kissen zu entriegeln. Senken Sie das Kissen auf den gewünschten Winkel ab und lösen Sie den Drehsperrehebel.

Andere Neigungsabschnitte: (Optional)


- Heben Sie das Kissen an, um es nach oben zu kippen. Die Kissenposition wird automatisch gesperrt. Zum Absenken das Kissen abstützen und den Verriegelungshebel drehen, um das Kissen zu entriegeln. Senken Sie das Kissen auf den gewünschten Winkel ab und lösen Sie den Drehsperrehebel. Achten Sie darauf, die Kissen an den Seiten zu halten, nicht an den Enden, um Quetschstellen zu vermeiden.

Elektrisch anhebbarer Mittelteil (nur PT9028, PT9029):

- Der EPT9028 und der EPT9029 werden standardmäßig mit dem elektrisch anhebbaren Mittelteil in der 7-teiligen Tischkonfiguration geliefert. Das elektrisch hochfahrbare Mittelteil wird mit einer Handbedienung bedient, die die Auf- und Ab-Option bietet.

Optional anhebbarer Mittelteil oder Liftback (3-teilig)

- Wenn der Tisch mit einem anhebbaren Mittelteil und einer anhebbaren Rückenlehne ausgestattet ist, verwenden Sie die angebrachte Handsteuerung, um das Teil wie unten angegeben anzuheben und abzusenken.

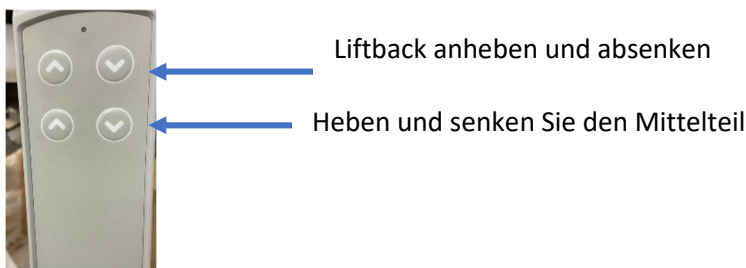

Vorbeugende Wartung:



WARNUNG: Trennen Sie den Tisch von der Stromquelle, bevor Sie mechanische Teile abwischen, um Verletzungen zu vermeiden.

INSPEKTION:

Mindestens einmal im Monat sollte der Tisch gründlich auf Verschleiß, lose Hardware und Teile und andere Schäden untersucht werden.

- Überprüfen Sie den Tisch, um sicherzustellen, dass keine äußeren Schäden oder lose Teile vorhanden sind. Lockere Hardware festziehen. Hardware, die sich nicht festziehen lässt, muss ersetzt werden.
- Untersuchen Sie den Tisch auf offensichtliche Anzeichen von Schäden oder Verschleiß wie gerissene Schweißnähte, lose Schrauben, ausgefranste oder beschädigte Kabel. Verwenden Sie keinen Tisch mit beschädigten Kabeln.
- Bewegliche Bauteile (elektrische und nicht elektrische) auf Funktion prüfen.
- Bauteile auf Verriegelung und Funktion prüfen.
- **Wenden Sie sich bei Fragen oder Bedenken an Pivotal Health Solutions.**

SCHMIERUNG:

Es wird empfohlen, die Lager des Tischantriebs alle sechs (6) Monate mit einem leichten Maschinenöl wie 3-in-1-Öl zu schmieren. Schmieren Sie nicht zu viel, da es wertlos ist und Staub und Schmutz ansammelt. Wischen Sie den restlichen Tischmechanismus mit einem sauberen Lappen ab.

Polsterreinigung & Pflege:



VORSICHT: Sorgfältig lesen, unsachgemäße Reinigung führt zum Erlöschen der Garantie. Verwenden Sie niemals Reinigungsmittel auf Alkoholbasis.

DESINFEKTION: Es gibt ein Desinfektionstuch auf dem Markt namens *Protex Ultra Desinfektionstücher*. Viele unserer Kunden nutzen diese.

FÜR DIE TÄGLICHE REINIGUNG: Eine Lösung aus 10 % mildem flüssigem Haushaltsspülmittel mit warmem Wasser, aufgetragen mit einem weichen, feuchten Tuch. Mit klarem Wasser abspülen und trocknen.

FÜR FLECKEN: Befeuchten Sie ein weiches weißes Tuch mit einer Eins-zu-eins-Lösung (1:1) aus Fantastik® und Wasser ODER Formula 409® und Wasser. Vorsichtig reiben und mit einem mit Wasser befeuchteten Tuch abspülen.

FÜR SCHWIERIGERE FLECKEN: Befeuchten Sie ein weiches weißes Tuch mit einer Lösung aus Haushaltsbleiche (10 % Bleichmittel / 90 % Wasser). Vorsichtig reiben und mit einem mit Wasser befeuchteten Tuch abspülen, um die Bleichmittelkonzentration zu entfernen.

WAS NICHT VERWENDEN IST: Die Verwendung der falschen Reinigungsmittel führt zum ERLÖSCHEN DER GARANTIE und zur Rissbildung, Austrocknung und Zerstörung Ihres Vinyls. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, die Alkohol, scharfe Chemikalien oder Scheuermittel enthalten.

Service:

Spezifische Garantieinformationen finden Sie im Abschnitt „Garantie“ in diesem Handbuch.

Verwenden Sie beim Austausch verschlissener Teile Originalteile von Pivotal Health Solutions, Inc., indem Sie sich an unsere Serviceabteilung wenden. Bei Ersatzteilbestellung:

- Fragen Sie nach der Serviceabteilung, 800-743-7738
- Halten Sie die Modell- und Seriennummer bereit
- Geben Sie die Teile anhand der nachstehenden Nummern/Beschreibung an

Fehlerbehebung:

Keine Energie	1. Überprüfen Sie die Stromversorgungsanschlüsse. 2. Überprüfen Sie, ob die Steckdose funktioniert und der Unterbrecher nicht ausgelöst wurde. 3. <i>Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Pivotal Health Solutions.</i>
Elevation: Tisch lässt sich nicht anheben oder absenken.	1. Überprüfen Sie, ob der Tisch in der Ausgangsstellung ist, indem Sie alle Tischabschnitte flach in horizontaler Richtung absenken. 2. Überprüfen Sie, ob das Kabel, das vom Fußanlasser zum Steuerkasten verläuft, richtig angeschlossen ist. 3. Suchen Sie nach Schäden an den Bedienelementen. 4. Stellen Sie sicher, dass die Steckdose ordnungsgemäß funktioniert. 5. <i>Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Pivotal Health Solutions.</i>
Wenn Sie ungewöhnliche Geräusche hören.	<i>Wenden Sie sich an Pivotal Health Solutions</i>
Orange LED am Akku während des Gebrauchs.	1. Wenn die Akku-LED während des Gebrauchs orange blinkt, setzen Sie den Akku auf das Ladegerät und laden Sie den Akku auf. Wenn die Batterie-LED durchgehend orange leuchtet und nicht aufgeladen wird, wenden Sie sich an Pivotal Health Solutions.

Technische Information:

Pivotal Health Solutions stellt auf Anfrage Schaltpläne, Komponentenlisten, Beschreibungen, Kalibrierungsanweisungen oder andere Informationen zur Verfügung, die dem Servicepersonal helfen.

Weiterverkauf oder Entsorgung:

Ein Therapietisch wird von der Food and Drug Administration als Medizinprodukt angesehen. Daher muss Pivotal Health Solutions, Inc. benachrichtigt werden, wenn der Tisch verkauft, zerstört oder anderweitig entsorgt wird. Bitte wenden Sie sich schriftlich unter Angabe Ihres Namens und der Seriennummer Ihres Tisches an:

Pivotal Health Solutions
Attn: Quality
3003 9th Ave. SW
Watertown, SD 57201 USA



Recyceln und entsorgen Sie das Gerät ordnungsgemäß gemäß den örtlichen, staatlichen und bundesstaatlichen Gesetzen. Im Laufe der Jahre wurden Tonnen von Elektronikgeräten mit gefährlichen Materialien mit dem normalen Müll entsorgt. Mit der Zeit sickern diese Materialien aus der Elektronik und schaden der Umwelt. Es ist wichtig, ausgemusterte Geräte fachgerecht zu entsorgen, um Schäden an unserer Umwelt zu vermeiden.

Ersatzteile:



Handsteuerung (EPT9028,
EPT9029)



HINWEIS: Diese Tische können verschiedene Kissenkonfigurationen haben. Bitte kontaktieren Sie Pivotal Health Solutions für Einzelheiten zum Ersatzkissen.

<u>Teilname</u>	<u>Artikelnummer</u>
Kopfkissen (3PC, 27")	PT30031-xxx
Brustkissen (3PC, 27")	PT30032-xxx
Beinkissen (3PC, 27")	PT30033-xxx
Schwarzer Griff mit festem Hebel	S1123
Externer Endschalter	S1187
Feststellrad	S1181
Nachlauf-Stellschraube M6-1,0 x 16 mm	LDS1012
Einzelnes Fußsteuerungspedal	S1075
Zweifaches Fußsteuerungspedal	S1077
Doppelte Fußstangensteuerung	S1158
Handsteuerung (EPT9028 & EPT9029)	S1195

*xxx ist ein Platzhalter für den Farbcode. Wenden Sie sich an Pivotal Health, um den entsprechenden Farbcode für Ihre Tabelle zu erhalten.

Garantie:

Einzelheiten zur Garantie finden Sie unter: <https://www.phsmedicalsolutions.com/customer-service/service-and-warranty>

Notiz: Die aufgeführten Garantiezeiträume gelten nur für Produkte, die im Neuzustand gekauft wurden. Alle Tische, die als Fabrikfehler oder in gebrauchtem Zustand verkauft werden, werden „wie besehen“ verkauft und sind auf eine (1) Jahr Garantie nur auf den Rahmen, beginnend mit dem Lieferdatum, beschränkt.

Hinweis für Benutzer: Wenn ein schwerwiegender Vorfall auftritt, melden Sie den Vorfall Pivotal Health Solutions. (Kontaktdaten finden Sie im Abschnitt mit den Kontaktinformationen des Herstellers). Wenn sich der Vorfall in der EU ereignet, melden Sie jeden schwerwiegenden Vorfall auch der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem der Anwender und/oder Patient niedergelassen ist.

Kontaktdaten des Herstellers:

Rev M 8/10/2026



Pivotal Health Solutions, Inc.
3003 9th Ave. SW
Watertown, SD 57201
USA



800-743-7738



011-1-605-753-0110



Fax: 605-882-8398



service@pivotalhealthsolutions.com



www.pivotalhealthsolutions.com



Emergo Europe
Westervoortsedijk 60
6827 AT Arnhem
The Netherlands



Sissel France SAS
14 rue des Grandes Bosses
44220 Coueron
France



Emergo Consulting (UK) Limited
Compass House, Vision Park Histon
Cambridge CB24 9BZ
United Kingdom



Performance Health International Ltd.
Nunn Brook Rd, Huthwaite Sutton-Ashfield,
Nottinghamshire NG17 2HU
United Kingdom



MedEnvoy
Gotthardstrasse 28
6302 Zug
Switzerland



Medidor AG
Lenzburgerstrasse 2
CH-5702 Niederlenz
Switzerland